

BACcT® コロコロマッシャー

No.004-CO

電気のいらない手動式ホモジナイザー（すり潰し器）

～ホモジバッグ専用～



◎ 特 徴

- 電源いらずの手動式ホモジナイザー（すり潰し機）です。
- 電源がいらないので、どこにでも持ち運んでご使用いただけます。
- ハンドルを矢印のほうに回転させていただきだけで、「たたく + 潰す」という一連の動作が可能となり、楽に検体をすり潰すことができます。検体数の多いお客さまには特にお勧めです。
- 前面の扉は取り外すことができるので、お手入れも簡単です。



開発者の声

「開発のきっかけは、お客様の声でした。」

多くのお客さまからご好評をいただいているホモジマッシャーですが、検体の多いお客さまから、「検体が多いとホモジマッシャーでの作業は疲れる」とのお話があり、営業のほうからもっと楽にホモジナイズ作業がおこなえる製品の開発を依頼されました。

開発の際にこだわったのは、「電気を使わない」ということと、「どのように潰すか」ということでした。

そこで考えたのが、従来のパドル式ホモジナイザーとホモジマッシャーを融合させた形で潰すという方式でした。

しかし、いざ形にするととなかなか難しく、当初はもう無理かとあきらめかけたこともありましたが、試行錯誤の結果、「たたく + 潰す」という動作を融合させた本器「コロコロマッシャー」を開発することができました。


自分でもお気に入りの製品です。

【すり潰し例①：ボイルたこ 5g + デリューションP 45cc】

【すり潰し例②：ボイルたこ 10g + デリューションP 90cc】



【各部の名称】

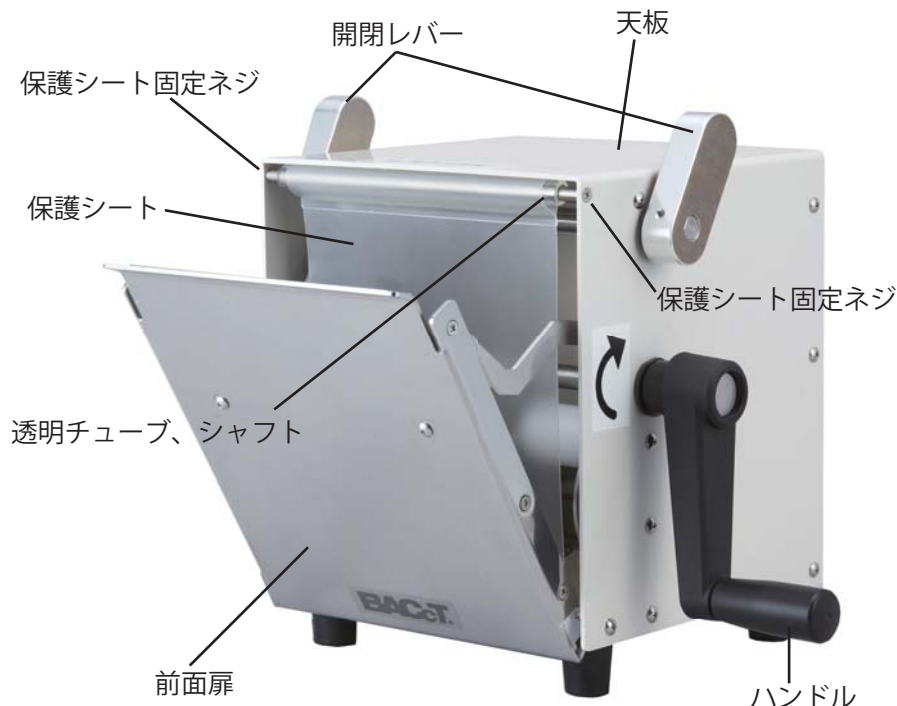

【ホモジバッグ No.012S/012ST】



□ ホモジバッグ(滅菌済)

検体のホモジナイズに使用する滅菌済サンプル袋です。

袋寸法：縦195×横130mm

*特許第3468617号 特許第5,586,732号(米国)

【仕様】

| | | | |
|---------|---------------------------|---------|---------------|
| 型 式 | No.004-CO | 本 体 材 質 | 本体 鋼板製・樹脂焼付塗装 |
| 本 体 寸 法 | 幅290×奥行180×高さ220mm(突起部含む) | | 扉 ステンレス鋼板 |
| 使 用 袋 | ホモジバッグ(縦195×横130mm) | | ローラー ジュラコン樹脂 |
| 処 理 容 量 | 総量50~100ml | | ローラー ジュラコン樹脂 |
| 重 量 | 5kg | | |

- 製品の改良のため予告なしに仕様・デザインを変更する場合があります。
- 製品使用前に取扱説明書をお読みになり、十分ご理解のうえご使用ください。

創業明治10年(1877年)

NBT 日本細菌検査株式会社
SINCE 1877 NIPPON BACTERIAL TEST Co., Ltd.
URL <http://www.bacct.com>

| | | |
|--|------------------------|--------------------|
| 本 社：〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2-13-59 | TEL (06) 6395-3731 (代) | FAX (06) 6395-3737 |
| 東 京 支 店：〒134-0084 東京都江戸川区東葛西5-27-2 アゴラビルディング3F | TEL (03) 5878-8910 (代) | FAX (03) 5878-8911 |
| 仙 台 営 業 所：〒981-8004 仙台市泉区旭丘堤2-18-16-102 | TEL (022) 219-2263 (代) | FAX (022) 219-2269 |
| 名 古 屋 営 業 所：〒464-0801 名古屋市千種区ヶ丘2-70-204 | TEL (052) 783-6200 (代) | FAX (052) 783-6202 |
| 大 阪 営 業 所：〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2-13-59 | TEL (06) 6395-3733 (代) | FAX (06) 6395-2051 |
| 広 島 営 業 所：〒732-0057 広島市東区二葉の里1-1-68 広島パレスビル4F | TEL (082) 262-4547 (代) | FAX (082) 262-4573 |
| 福 岡 営 業 所：〒812-0044 福岡市博多区千代3-2-1 | TEL (092) 631-4141 (代) | FAX (092) 651-0748 |
| 工 場：〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2-13-58 | TEL (06) 6395-3651 (代) | FAX (06) 6396-1789 |
| 食品科学研究所：〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2-13-57 | TEL (06) 6395-3736 (代) | FAX (06) 6150-3672 |